

Bedienungsanleitung

MULTIRESONANZSYSTEM



Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb des Geoway®
Multiresonanzsystems, ein Qualitätsprodukt Made
in Austria.

Wir wünschen Ihnen viel Freude damit.

Geschäftsleitung
DI Kurt Hilgarth
Geoway life balance GmbH

Damit Sie das Geoway® Multiresonanzsystem sicher
benutzen können, lesen Sie bitte diese
Bedienungsanleitung und die „Sicherheitshinweise“
sorgfältig vor dem Gebrauch durch.

Lieferumfang

Gerätebeschreibung und Gebrauchsanweisung, Netzkabel, Magnetfeldmatte mit integriertem Infrarot, Steuereinheit mit integrierter Farblichttherapie.

Sicherheitshinweise

Das Magnetfeldgerät darf nur an eine Stromversorgung mit 115V/230V und einem funktionsfähigen Schutzleiter angeschlossen werden!

Der Anschluss darf nur mit dem beigelegten Leiterkabel oder einem baugleichem Netzkabel erfolgen!

Bei der Aufstellung ist darauf zu achten, dass keine Flüssigkeiten in das Gerät gelangen können, benützen Sie deshalb das Gerät nicht in der Nähe eines Waschbeckens o.ä. Gefahrenquellen.

Das Gerät darf nicht direkt neben Diagnosegeräten oder Bildschirmen betrieben werden. Bei der Aufstellung ist darauf zu achten, dass das Kompletgerät in einen Mindestabstand von 1,5 Meter zu empfindlichen medizinischen und elektronischen Geräten betrieben wird.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe eines Heizkörpers, einer Heizungsklappe, eines Ofens oder sonstiger Wärmequellen.

Es ist darauf zu achten, dass keine mechanischen Verletzungen entstehen.

Das Gerät darf nicht in extrem feuchten oder extrem heißen Räumen betrieben werden (Sauna).

Bei allergischen Reaktionen sollte ein hautverträgliches Material auf die Matte aufgelegt werden.

Während oder kurz nach der Anwendung kann es zu Reaktionen kommen, welche wie jene aus der Homöopathie anzusehen sind. Der Körper merkt sich wo Blockaden vorhanden sind und will sie lösen.

Nach jeder Anwendung sollte die Matte desinfiziert werden. (Es könnten Krankheiten über Schweiß oder Blut übertragen werden.)

Vor der Anwendung sollten alle Magnetkarten, Uhren oder andere elektronischen Geräte entfernt werden. Bei Schadensfall wird keine Haftung übernommen.

Keinesfalls darf das Komplettsystem geöffnet und/ oder daran manipuliert werden.

Durch Öffnen des Gerätes/ der Matte erlischt der Garantieanspruch!

Bei Defekt bitte das Komplettsystem mit detaillierter Fehlerbeschreibung zur Reparatur einschicken.


Steuereinheit/ Display Beschreibung



Hauptschalter

- Hauptprogramm-Knöpfe:
Biorhythmus, Wellness, Sport, Body
 - Jedes der 4 Hauptprogramme hat 8 Unterprogramme.
- Start-Stopp Knopf
- Farblichttherapie Druckknopf
- Infrarot Druckknopf
- Farb-Druckknöpfe
- Dauerlauf Druckknopf

Die Matte

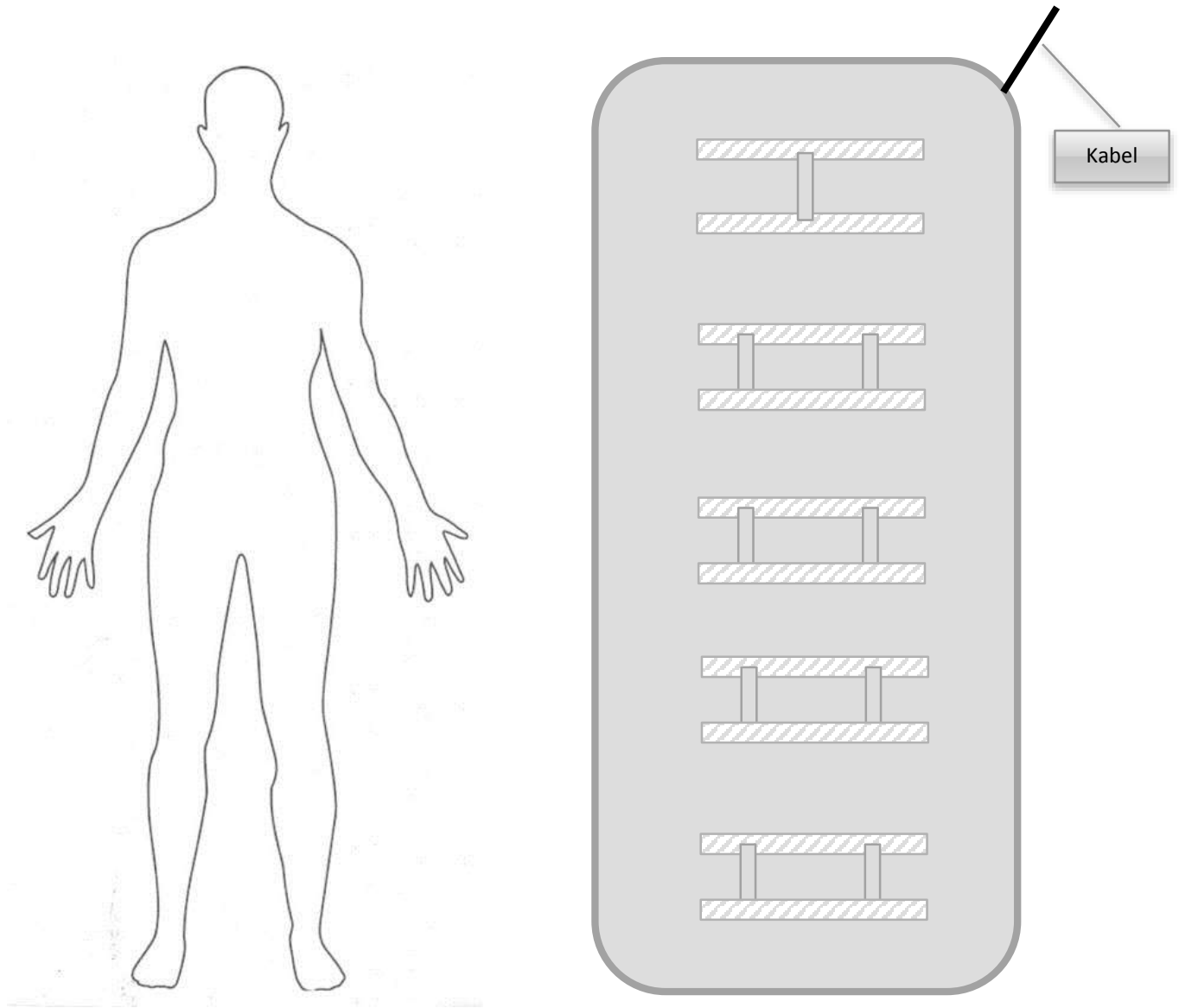


Inbetriebnahme

Nach Kontrolle auf Vollständigkeit, stellen Sie das Gerät an dem Ort auf, wo Sie es anwenden wollen.

1. Mitgeliefertes Netzkabel an das Stromnetz anschließen.



2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf „I“ drücken. Der Start-Stopp Knopf (5) leuchtet auf.

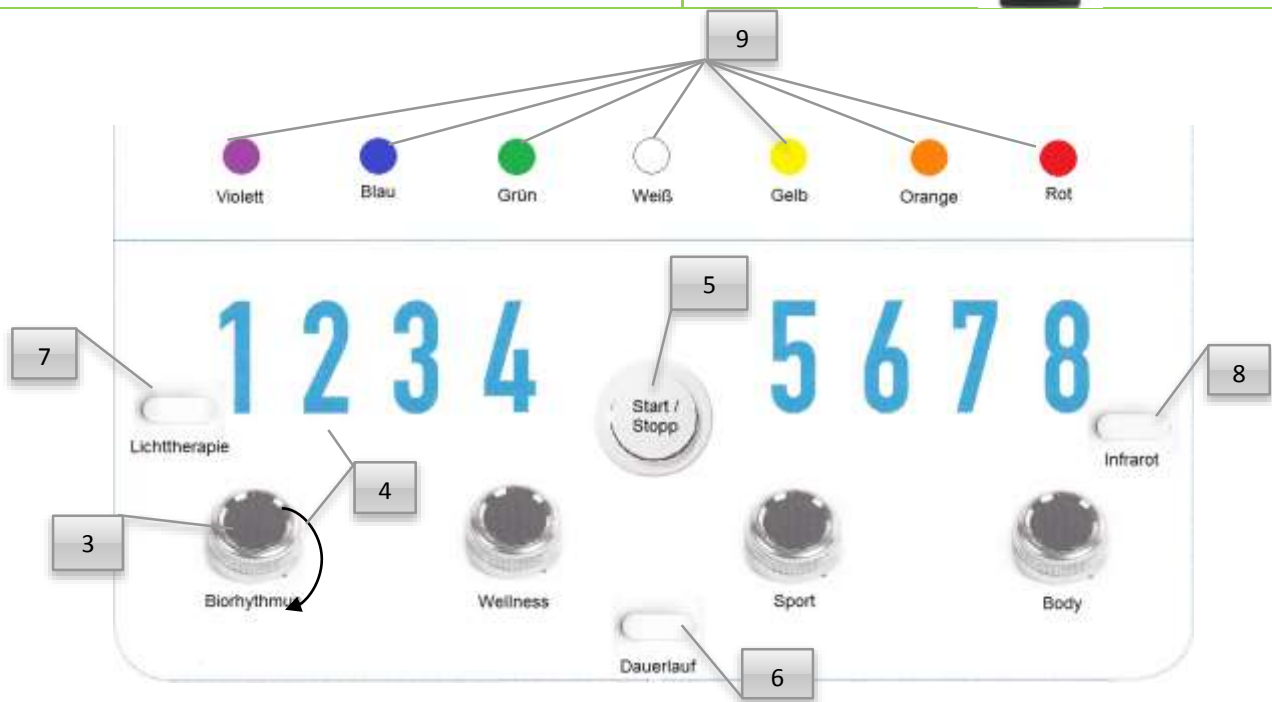

3. Hauptprogramm wählen

Wählen Sie eines der 4 Hauptprogramme (**Biorhythmus, Wellness, Sport, Body**) indem Sie auf den gewünschten Hauptprogramm-Knopf (Beispiel Biorhythmus) drücken. Der Knopf leuchtet auf.

4. Unterprogramm wählen

Jedes der 4 Hauptprogramme ist mit 8 Unterprogrammen hinterlegt, die jetzt für Sie bereit liegen. Ihr gewünschtes Unterprogramm wählen Sie, indem Sie den Hauptprogrammknopf (Beispiel Biorhythmus) drehen. Für das gewählte Unterprogramm leuchtet die entsprechende Ziffer auf.

5. Programm starten / stoppen

Drücken Sie den Start /Stopp Knopf. Das Programm startet, es ertönt ein Signalton. Sie unterbrechen das Programm, indem Sie denselben *Start –Stopp* Knopf betätigen - wiederum ertönt ein Signalton. Danach können Sie ab Punkt 3 oder ab Punkt 4 die Programmauswahl wiederholen.

6. Mit dem **Dauerlauf** Knopf (6) läuft Ihr ausgewähltes Programm auf unbegrenzte Zeit. Der Knopf leuchtet auf. Zum Beenden des Programms **Dauerlauf** den Knopf erneut drücken.

7. Farblichttherapie

8. Infrarot

9. Farbknöpfe

Jetzt können Sie auch, wenn gewünscht, den Knopf für die **Farblichttherapie** und/ oder die **Infrarottherapie** dazu schalten. Die Knöpfe für Infrarot/ Farblichttherapie leuchten beim Einschalten für 30 Minuten. Beide sind unabhängig voneinander und ebenso als Alleinanwendung verwendbar. Wählen Sie die gewünschte Farbe indem Sie auf den entsprechenden **Farbknopf** (9) drücken.

Programmliste

Starten Sie eines der Programme nach Ihrem Belieben. Wann und wie oft Sie das Magnetfeldsystem verwenden, entscheiden Sie individuell. Wichtig ist, dass die Anwendung immer als angenehm empfunden wird. Bei unangenehmen Reaktionen verkürzen Sie das Programm oder wechseln Sie zu einem schwächeren Programm. Programme mit niedrigeren Frequenzen (Hz) und geringer Kraft sind sanfter.

Hauptprogramm Biorhythmus

Das Einstiegsprogramm

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm um den Körper mit einer sanften Energie zu beflügeln. Geeignet besonders auch für sensible Menschen. Sehr gut zum Relaxen und Entspannen.



Für besonders sensible Menschen

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1 Morgen	Sägezahn	8 min	1%	sehr anregend
2	8 - 13 Hz Sinus	30 min	10%	dominiert beim Träumen und im aktiven Wachzustand bei Erwachsenen
3 Mittag	Sägezahn	8 min	1%	anregend
4	14 - 39 Hz Sinus	30 min	10%	dominiert bei Aufmerksamkeit und geistiger Tätigkeit bei Erwachsenen
5 Abend	Sägezahn	8 min	1%	beruhigend
6	4 - 7 Hz Sinus	30 min	10%	dominiert im Schlaf bei Erwachsenen
7 Nacht	Sägezahn	8 min	1%	sehr beruhigend
8	1 - 3,5 Hz Sinus	30 min	10%	dominiert im Tiefschlaf bei Erwachsenen

Hauptprogramm Wellness

Entschlackung, Entgiftung, Entspannung, zum Relaxen

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für gesundheitsbewusste, gestresste und sensible Menschen.



gestresste Menschen



gesundheitsbewusste Menschen



sensible Menschen

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 - 2 Hz Sinus	30 min	100%	beruhigend
2	1 - 3 Hz Sinus	30 min	50%	beruhigend
3	1 - 5 Hz Sinus	30 min	50%	beruhigend
4	7,83 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
5	1 - 10 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
6	5 - 15 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
7	10 - 70 Hz Sinus	30 min	100%	intensiv
8	1 - 1000 Hz Sinus	30 min	100%	stark anregend

Ausführliche Programm-Beschreibungen entnehmen Sie bitte aus der Beilage.

Hauptprogramm Sport

Sanfte energetische Unterstützung des Bewegungsapparates

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für sporttreibende Menschen für Muskel, Sehnen, Knochen und Knorpel



Sporttreibende Menschen

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 - 3 Hz Sinus	30 min	100%	sanft
2	1 - 10 Hz Sinus	30 min	100%	mittel
3	5 - 15 Hz Sinus	30 min	100%	mittel
4	25 Hz Sinus	20 min	50-100%	mittel
5	60 Hz Sinus	25 min	10-90%	mittel
6	10 - 70 Hz Sinus	30 min	100%	intensiv
7	1 - 1000 Hz Sinus	30 min	100%	intensiv
8	1000 - 10000 Hz Sinus	30 min	100%	stark

Hauptprogramm Body

Energetische Unterstützung des Organismus

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für Ältere, Sporttreibende und Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen.



ältere Menschen



sporttreibende Menschen



Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 Hz Sinus	30 min	1%	sensibel
2	0,2 Hz Rechteck	30 min	10%	Durchblutung, Hautirritationen körpereigene Abwehr, Unterstützung der Wirbelsäule
3	7 Hz Rechteck	30 min	100%	Knochen
4	15 Hz Rechteck	30 min	1-10%	Hüftgelenk
5	30 Hz Impuls-Signal mit ansteigender positiver Halbwelle	15 min	1%	frei einsetzbar bei akuten und chronischen Belastungen des Bewegungsapparates.
6	50 Hz Multi-Resonanz	30 min	10-50%	frei einsetzbar bei akuten und chronischen Belastungen des Bewegungsapparates.
7	72 Hz Rechteck	30 min	1-10%	dauerhafte Belastungen
8	73 Hz Rechteck	15 min	10-50%	Unterstützung der Sehnen

Lichttherapie

Neueste Forschungen haben einige bisherige Vermutungen bestätigt:

Violett - Ist die Farbe des Übersinnlichen, des Geistes und der Inspiration. Violette Licht ist unterstützend bei der Meditation. Es wirkt auf das Immunsystem und das Lymphsystem und unterstützt den Flüssigkeitshaushalt.

Blau - Ist die Farbe des Wassers, der Klarheit, Stille und Kälte. Löst alle Verspannungen, gibt kühle Ruhe und wirkt entspannend bei Nervosität und Schlaflosigkeit. Blau setzt die Pulsfrequenz herab und wirkt schmerzstillend und beruhigend.

Wenden sie blaues Licht nie länger als 30 Minuten an, da es sonst zur Schläfrigkeit führt. Auch nicht bei Erkältung, schlechter Durchblutung oder Muskelverspannungen anwenden.

Grün - Ist die Farbe der Natur und bedeutet Leben. Grünes Licht inspiriert und besänftigt. Grünes Licht hat eine positive Wirkung auf die Bronchien und Lungen.

Wirkt unterstützend bei Bluthochdruck, Herzschmerzen, Herzanfällen, Atmungsschwierigkeiten, Schlafstörungen.

Weiß unterstützt die Vitamin D Umsetzung. Die Farbe Weiß bedeutet Reinigung und Klarheit und entspricht dem Funktionskreis Lunge. Weißes Licht kann als Ergänzung von jeder Farbe verwendet werden, da Weiß alle Farben im Spektrum enthält und dadurch auch zur allgemeinen Heilung dient.

Gelb - Farbe der Sonne, wirkt ausgleichend bei Darmstörungen und Magenstörungen. Es wirkt unterstützend bei Lähmungen, Verspannungen der Muskulatur und Muskelkrampf. Bei Nervosität und Unruhe ist das gelbe Licht zu intensiv, da sollte es nur 5-10 min. angewendet werden.

Orange - Ist die Farbe der Lebensfreude, lässt von Niedergeschlagenheit zur Heiterkeit wechseln. Wirkt vorbeugend und unterstützend gegen Muskelkrämpfe, Depressionen und Verspannung der Muskulatur.

Rot - Ist in der fernöstlichen Lebensweise dem Element Feuer zugeordnet. Rotlicht regt die Durchblutung und den Stoffwechsel an, steigert das Wohlbefinden und gibt uns Energie und Vitalität.

Infrarot

Durchblutung: Der Körper reagiert auf das Einwirken von Infrarotstrahlung mit einer Erweiterung der Gefäße. Die Wärme wird auf den gesamten Körper verteilt, eine bessere Durchblutung wird erreicht. Die erhöhte Blutzirkulation verbessert die Versorgung der Zellen, die Herzfrequenz wird erhöht.

Stoffwechsel: Die Infrarotwärme animiert gesunde Körperteile und Organe zu erhöhter Aktivität. Der gesamte Stoffwechsel wird angeregt.

Schwitzen: Durch die Infrarotwärme produziert der Körper ein höheres Transpirationsvolumen. Die Wärme dringt in den Körper ein, Schadstoffe werden mit dem Schweiß aus dem Körper ausgeschwemmt.


Infrarot zur Vorbeugung und Regenerierung:

Muskeln werden schneller mit Sauerstoff versorgt - gegen Muskelkater, vorbeugend bei grippalen Infekten, Anregung des Stoffwechsels, Aktivierung des Immunsystems, Optimierung der Abwehrkräfte, zur Erweiterung der Blutgefäße, positive Wirkung bei Bluthoch- oder Blutniederdruck, regelt Durchblutungsstörungen, Herstellung der körperlichen Balance.

Frequenzbänder

Im GMS- Geoway® Multiresonanzsystem finden Sie alle, derzeit auf dem Markt befindlichen Frequenzmuster, die für die Magnetfeldanwendungen eingesetzt werden.

Biorhythmus Unterprogramme 1, 3, 5 und 7

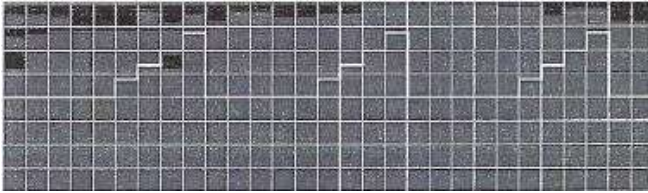


Sägezahn Frequenz

Body Unterprogramm 2



Rechteck Impuls

Body Unterprogramm 3

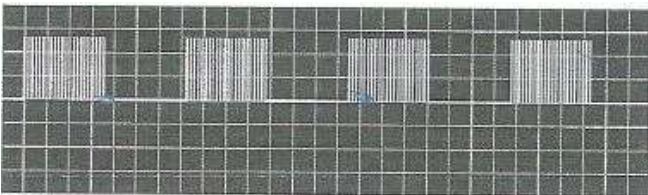


Rechteck Impuls

Body Unterprogramm 4




Rechteck Impuls

Body Unterprogramm 5

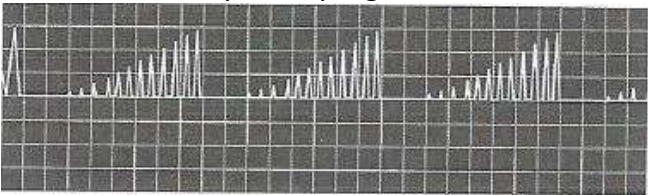


Impulssignal mit ansteigender Halbwelle

Body Unterprogramm 6

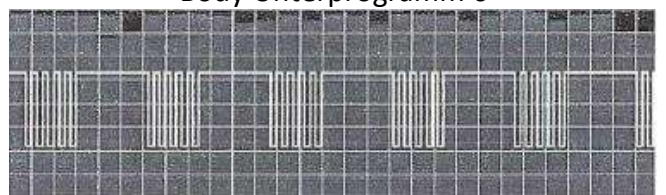


Multiresonanz

Body Unterprogramm 7

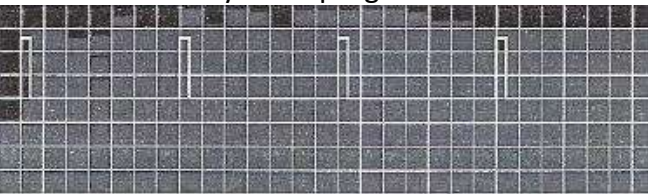


Rechteck Impuls

Body Unterprogramm 8

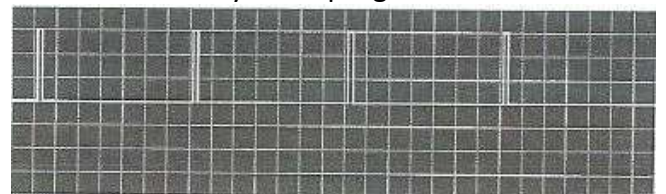

Rechteck Impuls

Sport Unterprogramme 1 bis 8,
Body Unterprogramm 1,
Biorhythmus Unterprogramme 2, 4, 6, 8,
Wellness Unterprogramme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

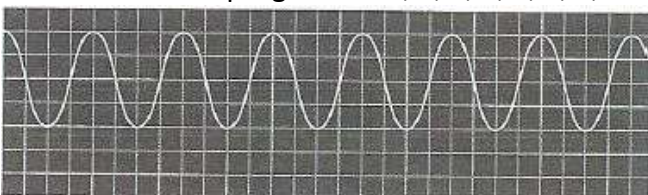

Sinus Reinfrequenz

Fehlermeldungen

Lesen Sie die folgende Anweisung, bevor Sie sich an Ihren Fachberater wenden. Funktioniert das Gerät auch nach Ausführung folgender Fehlerbehebungsmaßnahmen nicht, wenden Sie sich an Ihren Händler bzw. den Hersteller.

Fehlerbild	Ursache	Abhilfe
Keine Funktion	Keine Versorgungsspannung	Überprüfen Sie das Netzkabel und stellen Sie sicher, dass es an eine Steckdose mit Stromversorgung angeschlossen ist. Sicherung auf der Rückseite des Gerätes prüfen!
Alarm Signalton beim Starten des Programms	Keine Netzversorgung zur Matte	Prüfen Sie, ob der Verbindungsstecker zur Matte fest in der Gerätebuchse sitzt. Prüfen Sie in weiterer Folge, ob das Netzkabel und das Verbindungskabel zur Steuereinheit angeschlossen sind. Prüfen Sie das Verbindungskabel auf sichtbare Defekte. Bei einem Defekt, wenden Sie sich in diesem Fall an Ihren Fachberater.

Bei Defekt bitte das Komplettsystem mit detaillierter Fehlerbeschreibung zur Reparatur einschicken.

Serviceleistungen und Reparaturen dürfen nur vom Hersteller oder autorisierten Fachbetrieben vorgenommen werden. Bei Nichteinhaltung entfällt der Garantieanspruch. Im Garantiefall nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Vertreter oder dem Hersteller auf.

Hauptprogramm Biorhythmus

Das Einstiegsprogramm

Zum Kennenlernen wählen Sie das Hauptprogramm Biorhythmus. Dieses stellt eine Form von Energie bereit, die Ihren Körper auf sanfte Art und Weise in Schwingung versetzt.

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm um den Körper mit einer wohltuenden Energie zu beflügeln. Geeignet besonders auch für sensible Menschen. Sehr gut zum Relaxen und Entspannen.

Die meisten Funktionen des Körpers sind rhythmische Prozesse. Dabei hat jedes Organsystem einen gewissen Grundrhythmus, zusammengesetzt aus den Frequenzen seiner Einzelteile. Durch diese biologischen Rhythmen wird ein wesentlicher Beitrag zur inneren Optimierung und Kontrolle der Gesunderhaltung jedes Menschen erreicht. Die Anwendung von pulsierenden Magnetfeldern in den entsprechenden Frequenzen und mit den entsprechenden Feldstärken kann dabei gezielt Körper- und Gehirnfunktionen unterstützen.

Unter-Programm	Zeit	Kraft	
1 morgens	8 min	1%	Sehr anregend ; Kreislauf, Durchblutung, Knochen.
2 morgens 8 bis 13 Hertz	30 min	10%	Dominiert beim Träumen und im aktiven Wachzustand bei Erwachsenen. Das Alpha-Band: Die Schwingungen des Alpha-Bandes bestimmen den Wachzustand bei Erwachsenen. Sie können eine energetische Unterstützung für das Immunsystem, die Konzentration und die Merkfähigkeit sowie das Herz-Kreislaufsystem sein. Gleichzeitig kann die Durchblutung gefördert und die Lymphfähigkeit aktiviert werden. Positiv ist auch die energetische Wirkung auf das Klimakterium.
3 mittags	8 min	1%	Anregend ; zur Vorbeugung und Entspannung bei Verspannungen der Muskulatur, bei Hautunreinheiten.
4 mittags 14 bis 39 Hertz	30 min	10%	Dominiert bei Aufmerksamkeit und geistiger Tätigkeit bei Erwachsenen. Das Beta-Band: Die Schwingungen des Beta-Bandes finden sich bei Erwachsenen, während sie geistig tätig sind und besondere Aufmerksamkeit auf etwas lenken. Diese Frequenz kann dem Organismus helfen, geistige und körperliche Mehrleistung zu erbringen.
5 abends	8 min	1%	Beruhigend ; Stoffwechsel, Nerven, zur Stärkung des Immunsystems.
6 abends 4 bis 7 Hertz	30 min	10%	Dominiert im Schlaf bei Erwachsenen. Das Theta-Band: Die Schwingungen des Theta-Bandes dominieren im Schlaf bei Erwachsenen. Wenn man sich antriebslos fühlt oder zu oberflächlichem Schlaf neigt, sollte daher dieses Unterprogramm ausgewählt werden.
7 nachts	8 min	1%	Sehr beruhigend ; für einen gesunden Schlaf, bei Stress, bei seelischen Verstimmungen.
8 nachts 1 bis 3,5 Hertz	30 min	10%	Dominiert im Tiefschlaf bei Erwachsenen. Das Delta-Band entspricht der Frequenz des Organismus im Tiefschlaf, in der sich der Körper völlig entspannt und Verkrampfungen gelöst werden. Durch die gesteigerte Durchblutung können Nährstoffe und Sauerstoff aufgenommen, der Stoffwechsel angeregt und in der Folge eine gesunde Unterstützung gegeben werden. Auf diese Weise kann sich der Körper selbst regenerieren.

Hauptprogramm Wellness

Entschlackung, Entgiftung, Entspannung, zum Relaxen
Der „Turbo“ für Ihre Zellen

„Gesundheit ist ein Zustand vollständigen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur die Abwesenheit von Krankheit und Gebrechen.“ (1946 - Definition von Gesundheit laut WHO)

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für gesundheitsbewusste, gestresste und sensible Menschen.

Das Hauptprogramm Wellness fördert die Durchblutung, aktiviert die Zellen, unterstützt die Körperfunktionen wie Schlaf, Stoffwechsel, Konzentration, Verdauung, Bewegungsapparat, Ausscheidung, Atmung, Erholung, Muskel-, Herz- und Lungenfunktion.

Zur Energiesteigerung, Aktivierung der Selbstheilungskräfte, Stressbewältigung und Regeneration nach körperlicher Anstrengung (Bsp. Erschöpfung, Müdigkeit).

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 -2 Hz Sinus	30 min	100%	beruhigend
2	1 - 3 Hz Sinus	30 min	50%	beruhigend
3	1 -5 Hz Sinus	30 min	50%	beruhigend
4	7,83 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
5	1 - 10 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
6	5 - 15 Hz Sinus	30 min	100%	anregend
7	10 -70 Hz Sinus	30 min	100%	intensiv
8	1 - 1000 Hz Sinus	30 min	100%	stark anregend

Hauptprogramm Sport

Sanfte energetische Unterstützung des Bewegungsapparates

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für sporttreibende Menschen für Muskel, Sehnen, Knochen und Knorpel.

Die Unterprogramme fördern die schnelle Entgiftung vor oder direkt nach dem Training. Die Durchblutung wird angeregt, Stressabbau wird unterstützt und die Regeneration angeregt.

Eine gute Durchblutung sichert eine ausreichende Nährstoffzufuhr sowie den Abtransport von Schlackenstoffen und Stoffwechselendprodukten. Eine schlechte Durchblutung dagegen lässt Zellen schneller altern, was wiederum die Ursache vieler Befindlichkeitsstörungen und Krankheiten sein kann.

Die Schnellebigkeit des modernen Alltags bringt uns Menschen an den Rand unserer Belastbarkeit. Diese Lebensumstände verlangen daher Unterstützung, am besten aus der Natur selbst, um das Energielevel zu wahren. Der Körper befindet sich ein Leben lang in einem Abbau- und Regenerationsprozess. Unterstützen Sie diese Regelmechanismen. Das Hauptprogramm Sport hilft Ihnen den Tagesstress abzubauen und Ihre Batterien wieder aufzuladen.

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 - 3 Hz Sinus	30 min	100%	Sanft für Sehnen, Muskeln, Verspannungen
2	1 - 10 Hz Sinus	30 min	100%	Mittel Vielfach eingesetzt bei Verspannungen
3	5 - 15 Hz Sinus	30 min	100%	
4	25 Hz Sinus	20 min	50-100%	
5	60 Hz Sinus	25 min	10-90%	
6	10 - 70 Hz Sinus	30 min	100%	Intensiv Vielfach eingesetzt bei Knochen, Knorpel, Wirbelsäule, Bewegungs-/ Stützapparat.
7	1 - 1000 Hz Sinus	30 min	100%	
8	1000 - 10000 Hz Sinus	30 min	100%	

Hauptprogramm Body

Energetische Unterstützung des Bewegungs- und Stützapparates

Im Hauptprogramm Body finden Sie unterschiedliche Signale und verschiedenen Frequenzmuster, die speziell für den Bewegungs- und Stützapparat Anwendung finden.

Wir empfehlen dieses Hauptprogramm besonders für ältere, sportbegeisterte und Menschen mit körperlich anstrengenden Berufen.

Über Jahre hindurch beruflich bedingte körperliche Anstrengung kann zur Folge haben, dass Abnützungen im Bewegungs- und Stützapparat entstehen. Wir empfehlen diese Unterprogramme zum Regenerieren und zur Unterstützung der Gelenke.

Unter-Programm	Frequenz	Zeit	Kraft	
1	1 Hz Sinus	30 min	1%	Sensibel
2	0,2 Hz Rechteck	30 min	10%	Durchblutung, Hautirritationen körpereigene Abwehr, Unterstützung der Wirbelsäule
3	7 Hz Rechteck	30 min	100%	Knochenstoffwechsel
4	15 Hz Rechteck	30 min	1-10%	Hüftgelenk
5	30 Hz Impuls- Signal mit anstei- gender positiver Halbwelle	15 min	1%	frei einsetzbar bei akuten und chronischen Belastungen des Bewegungsapparates.
6	50 Hz Multi- Resonanz	30 min	10-50%	frei einsetzbar bei akuten und chronischen Belastungen des Bewegungsapparates.
7	72 Hz Rechteck	30 min	1-10%	dauerhafte Belastungen
8	73 Hz Rechteck	15 min	10-50%	Unterstützung der Sehnen



Hersteller:

Geoway life balance GmbH

Josef-Ressel-Weg 14

A-8430 Leibnitz

Tel: +43 (0)3452 71 369 E-Mail: info@geoway.at Web: www.geoway.at